

닥터베이 초음파 전동 칫솔 BB-2001A 사용 설명서

제품 사용 전 본 설명서를 자세히 읽어주시고 잘 보관해 주세요.



닥터베이 구강 케어 제품을 사용해 주셔서 감사합니다.

제품 특성에 따라 최적의 구강 케어 효과가 나타날 수 있도록 사용 전 본 설명서를 자세히 읽고 사용 방법에 따라 정확하게 사용해 주십시오.

목차

1. 안전 주의사항	1
2. 제품 소개	2
3. 사용 방법	4
4. 압력 감지 및 스마트 전환	7
5. 프리 설정	8
6. 충전 방법	10
7. 기본 사양 / 8. 고장 해결	11
9. AS 관련 사항	12

1. 안전 주의사항

안내

본 제품 첫 사용 시에는 가려움증 또는 출혈이 나타날 수 있습니다.

이는 잇몸이 진동 칫솔의 고주파 세척 방식에 적응을 하지 못하여 나타나는 현상으로 처음에는 소프트 모드로 사용하거나 민감형 칫솔모 사용을 권장합니다.

해당 현상은 일반적으로 1-2주 내로 사라지며 2주가 지나도 나아지지 않을 경우 본 제품 사용을 중지하시고 치과 전문의와 상담해 주십시오.

경고

1. 치아 교정, 치과 보철, 임플란트 등을 하고 있는 경우 치과 전문의의 지도에 따라 사용하여 주십시오.
2. 본 제품은 KC 기준에 적합한 상품입니다.
3. 본 제품은 구강 청결을 위해 설계된 제품으로 기타 용도로서의 사용을 금합니다.
4. 사용 시 불편함이나 통증이 있는 경우 본 제품 사용을 중지하시고 의사와 상담하여 주십시오.

중요

1. 사용 전 눈에 띄는 파손이 없는지 살펴본 후 사용하여 주십시오.
파손되었거나 심각하게 떨어뜨린 경우 사용하지 마십시오.
2. 전원 연결 전 접지 전원 전압이 본 제품에 표시된 전압과 부합하는지 확인하여 주십시오.
3. 기기를 칫솔 등 노출된 점화원과 가까이 두지 마십시오.
4. 본 제품(칫솔모, 본체, 충전 거치대)에 파손 흔적이 있는 경우 사용을 중지하십시오.
5. 온도 또는 습도가 높은 환경에서 사용하지 마시고 먼지가 적은 곳에서 사용하십시오.
6. 목욕 또는 샤워 시 사용하지 마십시오.

알림

1. 타인과 칫솔모를 함께 사용하지 마십시오.
2. 전원이 연결되었을 때에는 전원선을 충전 거치대에 감아두지 마십시오.
3. 전원이 연결되었을 때에는 금속 물체를 충전 거치대 위에 놓아두지 마십시오.
4. 사용 후 충전이 필요한 경우 본체의 충전 거치대 연결부가 완전히 건조되어 있는지 확인 후 전원을 연결하십시오.


금지사항

1. 본 제품을 물이나 액체에 넣지 마십시오.
2. 본 제품에 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오. 본 제품에 충격이 가해졌거나 떨어져 파손된 경우 사용을 중단하십시오.
3. 본 제품을 임의로 개조, 분해, 수리하지 마십시오.
4. 본 제품에는 충전 배터리가 내장되어 있습니다. 제품을 불에 넣어 가열하거나 고온의 환경에서 충전 및 사용, 방치하지 마십시오.

※ 설명서 상의 제품, 부품, 사용자 화면 등의 이미지는 참고용입니다. 제품 업데이트 및 업그레이드로 인해 이미지는 실물과 약간의 차이가 있을 수 있으며 실물을 기준으로 합니다.

2. 제품 소개

구강 건강 케어 비서로 닥터베이를 선택해 주셔서 감사합니다.

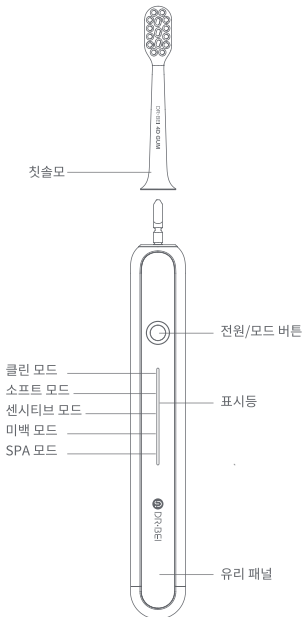

제품 리스트


제품 리스트 이미지에 따라 관련 부품이 모두 있는지 확인해 주세요.



본체 1개



충전 거치대 1개

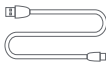

전원 케이블 1개



4D 칫솔모 2개



설명서 1부



PU 휴대용 케이스 1개

칫솔모 설명


닥터베이는 구강 상태에 따른 2가지 타입의 다른 칫솔모를 제공합니다.

소프트 4D 민감형 칫솔모는 구강이 민감하고 잇몸에 약간의 출혈 증상이 있는 사람에게 적합합니다.


표준 4D 클린형 칫솔모는 담배 및 차 찌꺼기 등 치석이 비교적 많은 사람에게 적합합니다.

※상기 안내는 참고용으로 개인의 구강 상태가 상이함에 따라 실제 자신에게 가장 적합한 칫솔모를 사용해 주세요.

4D 민감형 칫솔모(GUM)
DR.BEI 4D GUM

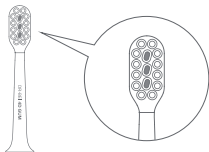

4D 클린형 칫솔모(CLEAN)
DR.BEI 4D CLEAN

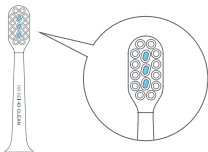

3. 사용 방법

전원 켜기

전원 버튼을 누르면 전원이 켜지며 처음에는 클린 모드로 시작됩니다.

전원 끄기


전원을 켜 후 '클린 모드 - 소프트 모드 -
센시티브 모드 - 미백 모드 - SPA 모드- 꺼짐'
순으로 다섯 가지 모드가 순환된 후
전원이 꺼집니다.

전원을 켜 후 한 가지 모드 상태에서 5초 이상
사용한 후에는 전원 버튼을 누르면
전원이 꺼집니다.

전원을 켜 후 한 가지 모드 상태에서 2분간
양치질을 하면 전원이 자동으로 꺼집니다.

모드 전환

전원을 켜 후에는 자동으로 클린 모드가 되며
5초 이내에 다시 전원 버튼을 누르면 차례로
'소프트 모드 - 센시티브 모드 - 미백 모드 -
SPA 모드 - 꺼짐' 순으로 6가지 상태가
순환됩니다.

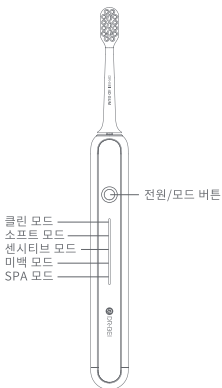

모드 기억

한 모드를 켜고 5초가 지나면 시스템에서 해당 모드를 기억하며 다음에 전원을 켤 때
해당 모드로 시작합니다.

양치 시간


각각의 모드는 30초마다 한 번씩 0.1초씩 멈춰 4번을 나누어 알림을 합니다.

1회 양치질 시간은 2분으로 총 3번 알림을 하고 2분이 되면 자동으로 꺼집니다.

시간은 새로운 모드로 전환하면 리셋되며 이전 모드와의 시간을 누적 계산하지 않습니다.

칫솔모 장착

다음 그림과 같이 칫솔모와 유리 패널을 한 방향으로 잡고 동력축을 따라 가볍게 아래로 눌러 고정시킵니다.

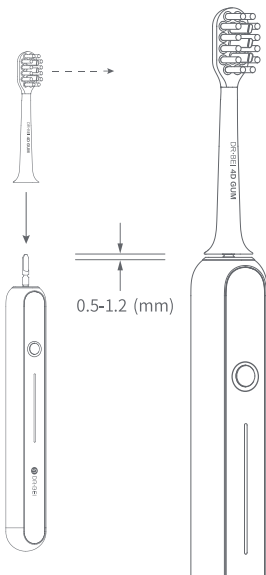

※완전히 끼웠을 때 0.5 ~ 1.2mm 유격은 정상입니다.

건강한 양치질

닥터베이 초음파 전동 칫솔은 미국 치과협회에서 추천하는 양치법을 적용하여 효과적으로 구강의 청결을 지켜줍니다. 다음의 몇 가지 권장 사항에 따라 청결 효과를 더욱 높여보세요.



칫솔모와 치아면이 45°가 되도록 기울여 주면 잇몸 사이의 플라그를 더욱 효과적으로 제거할 수 있습니다.



복합 주파수 저소음 브러시리스 자기 부상 초음파 모터



30초 스마트 알림으로 잠시 멈출 때 양치 부위를 바꿔주세요.



점차 강해지도록 설계하여 거품 날림을 방지하여 입안이 더욱 쾌적하도록 만들어 줍니다.

처음 사용 시에는 칫솔모로 치아를 부드럽게 눌러서 사용해 주시고 치아 2개 단위로 이동시켜 주세요. 30초 스마트 알림 기능으로 치아의 안쪽과 바깥쪽을 모두 깨끗하게 해줍니다.


청결유지



칫솔모를 깨끗이 닦고 통풍 환경을 유지시켜 줍니다.



전면 방수로 흐르는 물에 닦을 수 있습니다.

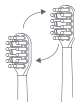


칫솔모는 2~3개월마다 교환하여 주세요.

4. 압력 감지 및 스마트 전환

본 제품은 칫솔모에 대한 치아가 주는 압력을 즉각적으로 감지하여 압력이 일정한 범위를 초과할 경우 경고 알림을 하고 스마트하게 압력을 전환하여 구강이 손상되지 않도록 보호합니다.

1. 칫솔모 압력이 너무 큰 경우 손잡이 끝부분의 경고등이 빨간색으로 표시되며 칫솔모 압력이 강하다는 것을 표시합니다.
2. 경고등이 켜짐과 동시에 시스템이 자동으로 칫솔의 진동 강도를 낮추며 적당한 압력이 되면 자동으로 원 상태로 회복됩니다.
3. 본 제품에서의 스마트 전환이란 칫솔모의 진동을 변환하는 것으로 칫솔모가 가하는 압력이 커서 구강이 손상되지 않도록 보호합니다.

본체 끝부분 그림:

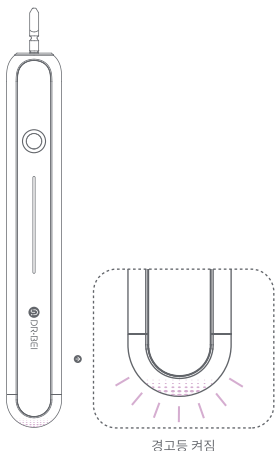

5. 프리 설정

프리 설정이란?

본 제품은 구강 케어에 따라 프리하게 칫솔모의 진동 강도를 조절하여 다양한 진동 강도를 제공합니다.

프리 설정 사용 방법


1. 전원을 켜 상태에서 전원 버튼을 길게(1초 이상) 누르고 손을 떼지 않으면 프리 설정으로 바뀌며 원하는 강도에서 손을 떼면 자동으로 프리 설정이 꺼집니다.
2. 프리 설정 시마다 선택한 진동이 기본 진동으로 설정됩니다.
3. 진동 강도를 재설정하려면 항목 1을 다시 진행하시면 됩니다.

진동 강도에 따른 표시등 길이와 색상:



공장 초기화 설정

진동을 공장 초기 설정으로 변경하고 싶을 경우 충전 거치대에 전원을 연결한 후 본체를 충전 거치대에 놓습니다. 흰색 표시등이 켜질 때까지 전원 버튼을 2초 이상 길게 누르면 공장 초기화 상태가 됩니다.

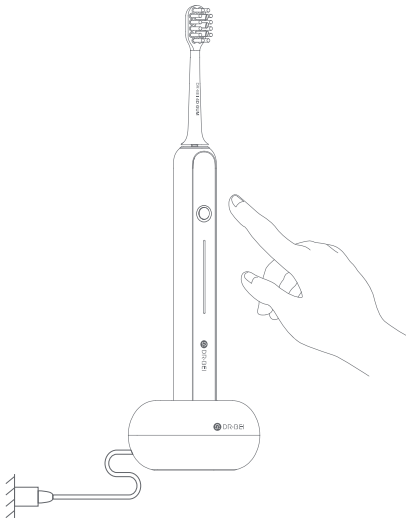

주의사항

1. SPA 모드는 잇몸 마사지 효과를 위해 프리 설정 기능을 제공하지 않습니다.
2. 프리 설정을 통해 진동 강도를 더욱 프리하게 선택할 수 있으며 가장 만족스러운 진동 강도로 설정하여 깨끗한 양치질과 함께 잇몸도 보호해 주십시오.

6. 충전 방법

본체를 충전 거치대에 끼우고 전원을 연결하면 전원이 들어오며 충전됩니다.

사용 시 모드 및 배터리 잔량 표시등

■ 파란색: 배터리 잔량 10%~100%, 약 3개월 사용

■ 주황색: 배터리 잔량 5%~10%, 약 7.5일 사용

■ 빨간색: 배터리 잔량 0%~5%, 약 3일 사용

5개 모드 중 사용 중인 모드는 연분홍색으로 표시되며 다른 4개 표시등 색상은 배터리 잔량을 표시합니다.

충전 상태에서의 표시등

■ 초록색 켜짐: 100% 충전

■ 초록색 깜빡임: 20%~100% 충전

■ 주황색 깜빡임: 10%~20% 충전

■ 빨간색 깜빡임: 0%~10% 충전

충전 시작 시 표시등이 순차적으로 깜빡입니다.



충전 주의사항

1. 충전 거치대를 물 또는 액체에 넣지 마십시오.
2. 충전 거치대를 온도나 습도가 높은 환경에서 충전 및 사용하지 마십시오.
3. 충전 시에는 전동 칫솔을 사용하지 마십시오.

※ 충전 표시등 알림: 본체를 충전 거치대에 끼우면 충전 시작 시 현재 배터리 상태에 따라 표시되며 흐르듯 움직입니다. 이후 현재 배터리 잔량에 따른 표시등이 깜빡입니다. 깜빡이는 상태에서 전원 버튼을 누르면 10초간 흐르듯 움직이고 다시 깜빡입니다.

7. 기본 사양

닥터베이 초음파 전동 칫솔 BB-2001A		
본체	제품 모델	BB-2001A
	작동 전압	3.7V---
	제품 출력	4.2W
	방수 등급	IPX7
	충전 시간	완충까지 약 12시간 이상
충전 거치대	제품 입력	5V---1A
제조년월		별도표기
원산지		중국

8. 고장 해결

고장 현상	고장 원인	해결 방법
칫솔모를 동력축에 연결할 수 없어요.	칫솔모 삽입구에 이물질 있음. 동력축에 이물질 있음. 칫솔모가 정품이 아니거나 모델이 다름. 장착한 방향이 정확하지 않음.	이물질을 제거해 주세요. 정품 칫솔모를 구매해 주세요. 내부 구조에 따라 정확하게 장착해 주세요.
전원이 켜지지 않아요.	배터리 잔량이 부족하거나 방전되었거나 충전 중.	즉시 충전을 하거나 충전 거치대에서 전동 칫솔을 빼고 사용해 주세요.
칫솔 진동이 너무 약해요.	칫솔모를 정확하게 연결하지 않음. 칫솔모와 동력축에 이물질이 있음.	정확하게 장착해 주시고 이물질을 제거해 주세요.
전동 칫솔이 충전 거치대에 연결되지 않아요.	손잡이 하부 연결부에 이물질이 있음. 연결부에 이물질이 있음.	이물질을 제거해 주세요.
전원 연결 후 전동 칫솔 표시등이 들어오지 않아요.	플러그를 정확하게 전원에 연결하지 않음. 배터리가 방전되었거나 배터리 잔량이 낮음.	전원이 연결되어 있는지 확인해 주세요.
충전 표시등이 들어오지 않아요.	배터리가 방전되었거나 배터리 잔량이 매우 낮음.	충전하면 회복됩니다.
진동이 너무 약해요.	프리 설정이 적합하지 않음.	공장 초기화해 주세요.

9. AS 관련 사항

AS 정책

- 사용 중 발생한 하자의 경우 '공정거래위원회 소비자 분쟁 해결기준'에 준하여 처리됩니다.
- 제품 보증기간: 구매일 기준 6개월
- 보증 제외 사항
 - 사용 설명서 내용에 따른 유지, 보관하지 않아 발생한 손상의 경우
 - 제품 사용 중 발생하는 정상적인 탈색 및 마모의 경우
 - 파손, 임의 분해, 침수, 자연현상(낙뢰, 침수 등)으로 고장이 발생한 경우
 - 구매 영수증이 없거나, 품질 보증기간이 만료된 경우
 - 소모성 부품의 경우 보증 제외함

AS 운송비

- 구매 후 14일 이내 제품 불량 시 왕복 운송비 당사 부담.
- 구매 후 14일 이후 교환 또는 AS 발생 시 운송비 고객 부담.
- 고객 단순 변심에 의한 반품 시 왕복 배송비 전액 고객 부담.
- 배송비 부담은 당사에서 지정한 택배사를 이용한 경우만 적용되며, 임의의 운송방법을 이용하는 경우 운송비는 고객 부담임

교환/반품 기준

- 구매 후 14일 이내 정상적인 사용 중 문제 발생 시
 - 교환/반품 시 배송비는 판매사가 부담합니다.
 - 교환/반품 신청 시 제품 포장상태(박스, 내용물 등)이 완벽해야 하며, 누락된 제품은 별도 청구합니다.
 - 별도로 구매한 소모품의 경우 사용하였을 경우 반품 신청이 안됩니다.
 - 반품/교환 신청 시 당사에서 전문 인력의 점검 후 판정되며, 정상 판정 시 왕복 배송비가 청구됩니다.
- ※제품 박스는 안전한 운송을 보장합니다. 따라서 제품 수취일로부터
최소 14일간은 해당 제품 박스를 버리지 말고 보관하시기 바랍니다.

AS가 필요하시면 고객센터에 연락해주세요.

수입원: (주)와이엘인터내셔널

고객센터: 카카오톡 채널 1:1 채팅 상담(카카오톡 검색창에 '와이엘인터내셔널' 검색), 02-853-1107

주소: 서울 금천구 가산디지털2로 62 3층 와이엘인터내셔널

BEST PARTNER FOR YOUR BUSINESS

안녕하세요, 와이엘인터내셔널 고객님.
저희 제품을 구매해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

저희 와이엘인터내셔널은 2013년 12월에 설립한 이래 매년 새롭고 우수한 해외 제품을 선별하여 한국 시장에 공급하고 있습니다.

더불어 한국 및 중국, 동남아시아를 포함한 해외 시장 조사, 진출 및 구매 대행 등 광범위한 인적 네트워크와 경험을 통해 국내 시장의 트렌드를 만들어가고 있습니다.

소비자가 필요로 하는 새로운 제품과 서비스를 발굴하여 만족과 기쁨을 드리는 것이 저희의 비전입니다. 이를 위해 국내외 시장을 보는 국제적인 시각으로 사회에 보탬이 되기 위해 부단히 노력하고 있습니다.

고객님 한 분 한 분의 큰 만족을 위하여 최고의 제품과 최상의 서비스를 제공하겠습니다. 다시 한번 저희 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
감사합니다.

주식회사 와이엘인터내셔널

와이엘인터내셔널 공식몰 : 와이엘샵 <https://ylshop.co.kr>

카카오톡채널 : 카카오톡 상단 검색창 '와이엘인터내셔널' 검색

인스타그램 : @yl_international,

https://www.instagram.com/yl_international

페이스북 : <https://www.facebook.com/ylintl>



모델명 : BB-2001A

적합성평가번호 : -

안전인증 : -

수입자 : (주)와이엘인터내셔널